

Flexitime®

Niezawodna precyzja



Flexitime®

- Precyzja i dokładność dopasowania
- Elastyczny czas pracy połączony zawsze z krótkim czasem wiązania w jamie ustnej
- 7 lat doświadczenia na rynku – sprawdzony klinicznie
- Doskonała jakość



Flexitime koncepcja czasu wiązania

Elastyczny czas pracy	Tylko 1:00 min lub do 2:30 min!	Krótki czas wiązania w jamie ustnej. Zawsze 2:30 min!
Most wielopunktowy	2:30	2:30
Pojedyncza korona	1:30	2:30

Flexitime® - wiązanie materiału rozpoczyna się po wprowadzeniu do ust.

Flexitime® – Silikon typu - A precyzyjny materiał wyciskowy zapewniający zawsze niezawodną dokładność pracy.



nowość

Flexitime® Bite

- Niezawodna precyzja za każdym razem
- Stosowany do uniwersalnej rejestracji zwarcia oraz skanowania obecności antagonistów bez użycia pudru
- Bardzo duża twardość końcowa – D 40 w skali Shore'a
- Bardzo krótki całkowity czas pracy – 1:00 min
- Wyraźnie tiksotropowy, o konsystencji bitej śmietany
- Zdolny do skanowania w technologii CAD/CAM

Flexitime® Dynamix® Putty – niezawodna precyzja

- Prawdziwa konsystencja putty do mieszania automatycznego
- Wyważona twardość dla optymalnego nacisku na materiał korekcyjny.
- Stabilność wymiarów i proste wyjmowanie z jamy ustnej.

Flexitime® Dynamix® Putty – komfort pracy

- Minimalna kleistość
- Łatwa obróbka przy wycisku korekcyjnym
- Wiązanie nie jest zakłócone przez siarkę, zawartą w rękawiczkach lateksowych osoby mieszającej
- Proste i szybkie mocowanie naboju w mieszalnikach Dynamix®

Dynamix® Cartridge

- Niezawodny i stabilny w uzyskiwaniu jednorodnej jakości mieszania
- Ekonomiczny dzięki większej objętości i mniejszym stratom masy po opróżnieniu naboju
- „Ready-to-Use” do szybkiego i prostego zastosowania
- Przyjazny dla środowiska, oznakowany zielonym punktem dla podwójnego systemu usuwania odpadów.



Mieszalnik Dynamix®

– proste postępowanie i niezawodność


- Dwie prędkości dozowania dla napełniania łyżek wyciskowych i strzykawek
- Automatyczny przesuw tłoków po naciśnięciu guzika
- Automatyczny powrót tłoków podczas wymiany kartuszy
- Czytelne i jednoznaczne oznakowanie elementów i świecących diod funkcyjnych.
- Wskazania poziomu położenia tłoka
- Przezroczysta pokrywa

Flexitime® Dynamix® Putty

– Przetestowany przez stomatologów, zaakceptowany przez stomatologów

Wyniki testu przeprowadzonego przez użytkowników z Flexitime Dynamix Putty dla 1 372 wycisków w Niemczech, Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Jak oceniasz precyzję wycisku w kombinacji z Flexitime Correct Flow?

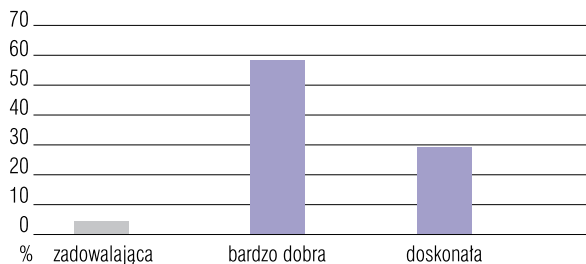

90% osób testujących oceniło precyzję wycisku w kombinacji z Flexitime® Dynamix® Putty/Flexitime Correct Flow jako bardzo dobrą do doskonałej.
Źródło: wewnętrzne dane Kulzer GmbH

Opis zawartości opakowań mas Flexitime®

opakowanie	zawartość
Flexitime Bite 	2 x 50 ml Flexitime Bite; 12 końcówek mieszających (zielonych); instrukcja obsługi
Flexitime Dynamix Putty Trial Kit	1 x 380 ml Dynamix Putty 10 x końcówki mieszające Dynamix (żółte) 1 x pierścień mocujący 1 x 50 ml Correct Flow (1:1) 6 x końcówki mieszające (żółte) 6 x końcówki wewnętrzne (żółte) 1 x uniwersalny klej do łyżek
Flexitime Dynamix Putty refill	2 x 380 ml Dynamix Putty 2 x końcówki mieszające Dynamix (żółte) 1 x pierścień mocujący
Flexitime Dynamix Heavy Tray Kit	1 x 380 ml Dynamix Heavy Tray 10 x końcówki mieszające Dynamix (żółte) 1 x pierścień mocujący 1 x 50 ml Correct Flow (1:1) 6 x końcówki mieszające (żółte) 6 x końcówki wewnętrzne (żółte) 1 x uniwersalny klej do łyżek
Flexitime Dynamix Heavy Tray refill	2 x 380 ml Dynamix Heavy Tray 2 x końcówki mieszające Dynamix (żółte) 1 x pierścień mocujący
Flexitime Dynamix Monophase Trial Kit	1 x 380 ml Dynamix Putty 10 x końcówki mieszające Dynamix (żółte) 1 x pierścień mocujący 1 x uniwersalny klej do łyżek
Flexitime Dynamix Monophase refill	2 x 380 ml Dynamix Monophase 2 x końcówki mieszające Dynamix (żółte) 1 x pierścień mocujący
Promocja!	<p>Zestaw nr 1 1 x Flexitime Dynamix Putty Trial Kit 3 x Flexitime Dynamix Putty refill 2 x 50 ml Correct Flow (1:1) 1 x urządzenie mieszające Dynamix</p> <p>Zestaw nr 2 1 x Flexitime Dynamix Heavy Tray Kit 3 x Flexitime Dynamix Heavy Tray refill 2 x 50 ml Correct Flow (1:1) 1 x urządzenie mieszające Dynamix</p> <p>Zestaw nr 3 1 x Flexitime Dynamix Monophase Trial Kit 3 x Flexitime Dynamix Monophase refill 1 x metalowa strzykawka do mas 1 x urządzenie mieszające Dynamix</p>
Zestaw mas Flexitime + automatyczny mieszalnik Dynamix	

Partner Heraeus

Przedstawiciele regionalni Heraeus:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków i okolice
Konrad Kędziora, tel.: 0 600 976 698, k.kędziora@heraeus-kulzer.pl
Warszawa, Lublin, Rzeszów, Kielce i okolice
Grzegorz Welo, tel.: 0 600 976 792, g.welo@heraeus-kulzer.pl
Poznań, Kalisz, Wrocław, Konin, Sieradz i okolice
Piotr Kupis, tel.: 0 604 241 425, p.kupis@heraeus-kulzer.pl

www.heraeus-kulzer.pl

Konsultanci firmy Heraeus:

stomatologia: lek. dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska
tel.: 0 600 975 896, m.grzegorzak@heraeus-kulzer.pl
protetyka: tech. dent. Przemysław Rajczak
tel.: 0 602 267 218, p.rajczak@heraeus-kulzer.pl

Heraeus - Kulzer kontakt w Polsce

tel./fax: 033 496 35 39, biuro@heraeus-kulzer.pl
Country Manager: Jarosław Bruszewski