


Precyzja + intuicja w samym centrum
Heramat C3 + C3 press

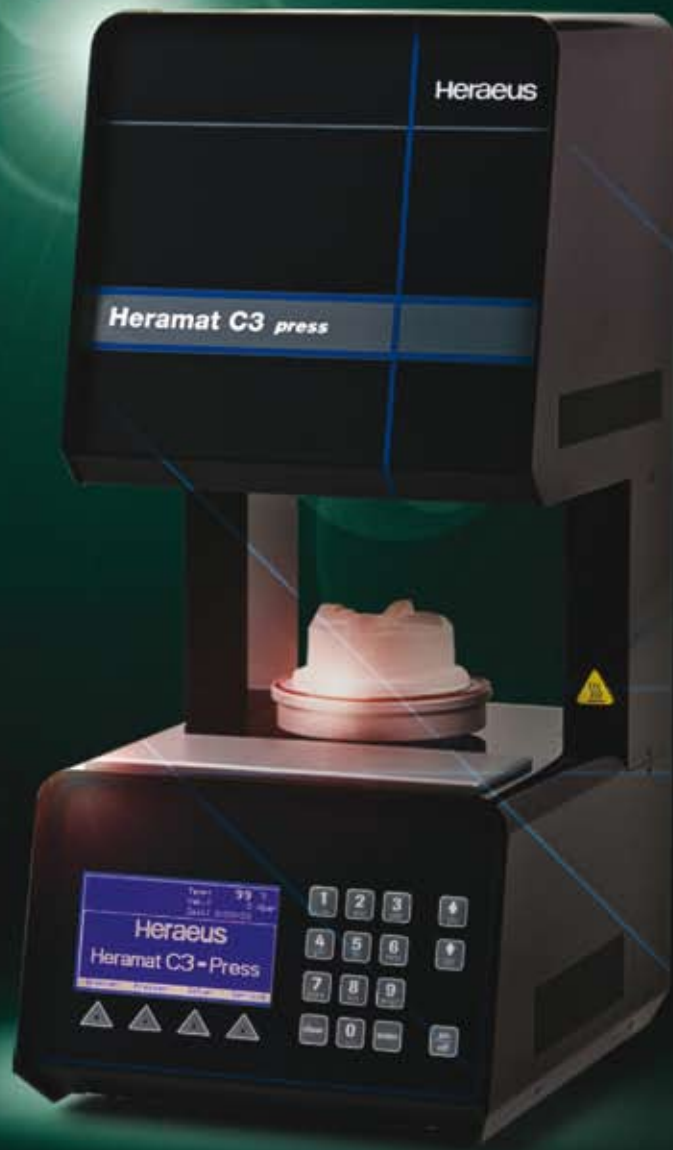

Precyzja + intuicja w centrum Heramat C3 + C3 press

Piece do wypalania o najwyższej jakości

Piec Heramat C3 prezentuje się w najlepszym świetle: jako piec do ceramiki nowej generacji o wysokiej skuteczności wraz z możliwością indywidualnego ustawiania wypalania.



Precyzja

Technika plus bezpieczeństwo: przekonajcie się Państwo, jak wysoka jest precyzja wypalania pieców Heramat C3 i C3 press.



Intuicja

Technika plus komfort: intuicyjny panel sterowania ułatwi Państwu obsługę procesów pracy.



Niezbite argumenty

Na nowym panelu czołowym wyświetlane są za jednym razem wszystkie istotne informacje dotyczące parametrów programowania oraz stanu komory wypalania.

Intuicyjnie sterowane oprogramowanie błyskawicznie poprowadzi Państwa na żądany poziom programu oraz w sposób znaczący ułatwi obsługę pieców Heramat C3 i C3 press.

Dla serii pieców C3 zasady zostały jeszcze bardziej zoptymalizowane, a dokładność temperatury - podwyższona. Pamięć obejmuje


standardowo 180 programów, a także 20 dodatkowych programów do tłoczenia w modelu Heramat C3 press.

Wchodząca w skład wyposażenia podstawa do wypalania umożliwia, w porównaniu do innych nośników materiałów poddawanych wypalaniu, optymalne przenoszenie ciepła na wybrany obiekt.

Piec Heramat C3 oferuje Państwu to wszystko, czego można wymagać od nowoczesnego pieca ceramicznego – poza tym w korzystnej relacji ceny do wydajności.

Łatwa obsługa pozwalająca osiągnąć najlepsze rezultaty


Urządzenia Heramat C3 i C3 press są łatwe do zaprogramowania, poza tym wprowadzą najwyższą jakość ceramiki do Państwa laboratorium.

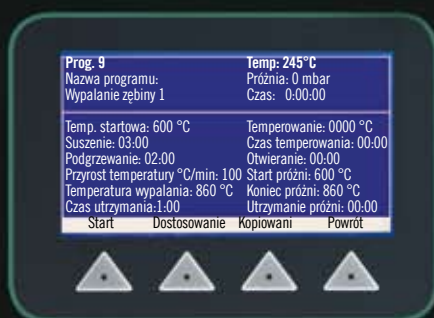


Wszystko jest widoczne na jednym monitorze. Istnieje możliwość bezpośredniego dostosowania wszystkich parametrów.



W skład podstawowego wyposażenia wchodzi stolik do wypalania oraz stolik z dodatkową funkcją tłoczenia.

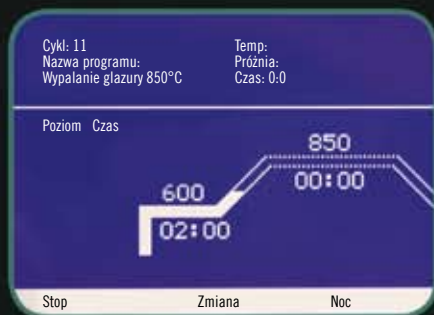

Stale informowanie o statusie aktualnie używanego programu w formie wykresu.

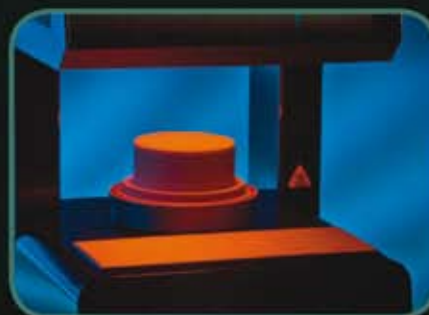

Duża powierzchnia do położenia obiektów oraz podstawek do wypalania.



Proszę nas sprawdzić!

Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Heraeus Kulzer.
Czekamy na Państwa telefon!

Dane techniczne

	Heramat C3	Heramat C3 press
Programy wypalania	180	180
Programy do tłoczenia	–	20
Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm)	290 x 630 x 380	290 x 630 x 380
Wymiary komory wypalania	Ø 95 mm Höhe 60 mm	Ø 95 mm Höhe 60 mm
Wielkość stolika	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Waga netto	22 kg	23 kg
Napięcie zasilające	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Moc znamionowa	1750 W	1750 W
Moc pompy	230 V / 5 A	230 V / 5 A
Zakres temperatury	100 °C – 1100 °C	100 °C – 1100 °C
Przyrost temperatury	10 – 120 °C/min	10 – 120 °C/min
Dokładność utrzymania temperatury	1 °C	1 °C
Wydatność próżni przy ciśnieniu atmosferycznym	0 – 990 hPa	0 – 990 hPa
Utrzymanie funkcji stolika	00:00 – 99:00 min	00:00 – 99:00 min
Czas utrzymywania, aż do osiągnięcia temperatury końcowej	00:00 – 99:00 min	00:00 – 99:00 min
Czas próżni aż do osiągnięcia temperatury końcowej	00:00 – 99:00 min	00:00 – 99:00 min
Tolerancja czasu	1 s	1 s

www.heraeus-dental.pl

Biuro – ☎ / 📠 (33) 496 35 39, ✉ biuro@heraeus-kulzer.pl;

Konsultanci: lek. dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska, ☎ +48 600 975 896;
tech. dent. Przemysław Rajczak, ☎ +48 602 267 218, ✉ p.rajczak@heraeus-kulzer.pl

Przedstawiciele:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Kielce i okolice – Konrad Kędziora, ☎ +48 600 976 698;

Warszawa, Lublin, Rzeszów i okolice – Grzegorz Welo, ☎ +48 600 976 792;

Poznań, Kalisz, Wrocław, Konin, Sieradz i okolice – Piotr Kupis, ☎ +48 604 241 425;

Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń – Grzegorz Rymarzak, ☎ +48 502 261 007